

Materassino Agopressione

magTM



Rigidità
Tensioni muscolari
Stress fisico e mentale
Insonnia
Dolori a schiena,
spalle, collo


**E' sufficiente distendersi e fin dal primo
utilizzo proverai il suo benefico effetto**

**Il peso del corpo sulle punte svolge
un' azione benefica in modo del tutto naturale**

Come funziona ed a cosa serve

Il materassino contiene 210 "rosette" in plastica ABS atossica, idrorepellente e inodore, saldate sul tessuto senza l'utilizzo di collanti. Ogni rosetta ha 42 piccole e stimolanti punte, dalla forma studiata e collaudata, per un totale di oltre 8.800

Il cuscino serve da supporto per la testa quando distesi e svolge la sua azione a livello cervicale.

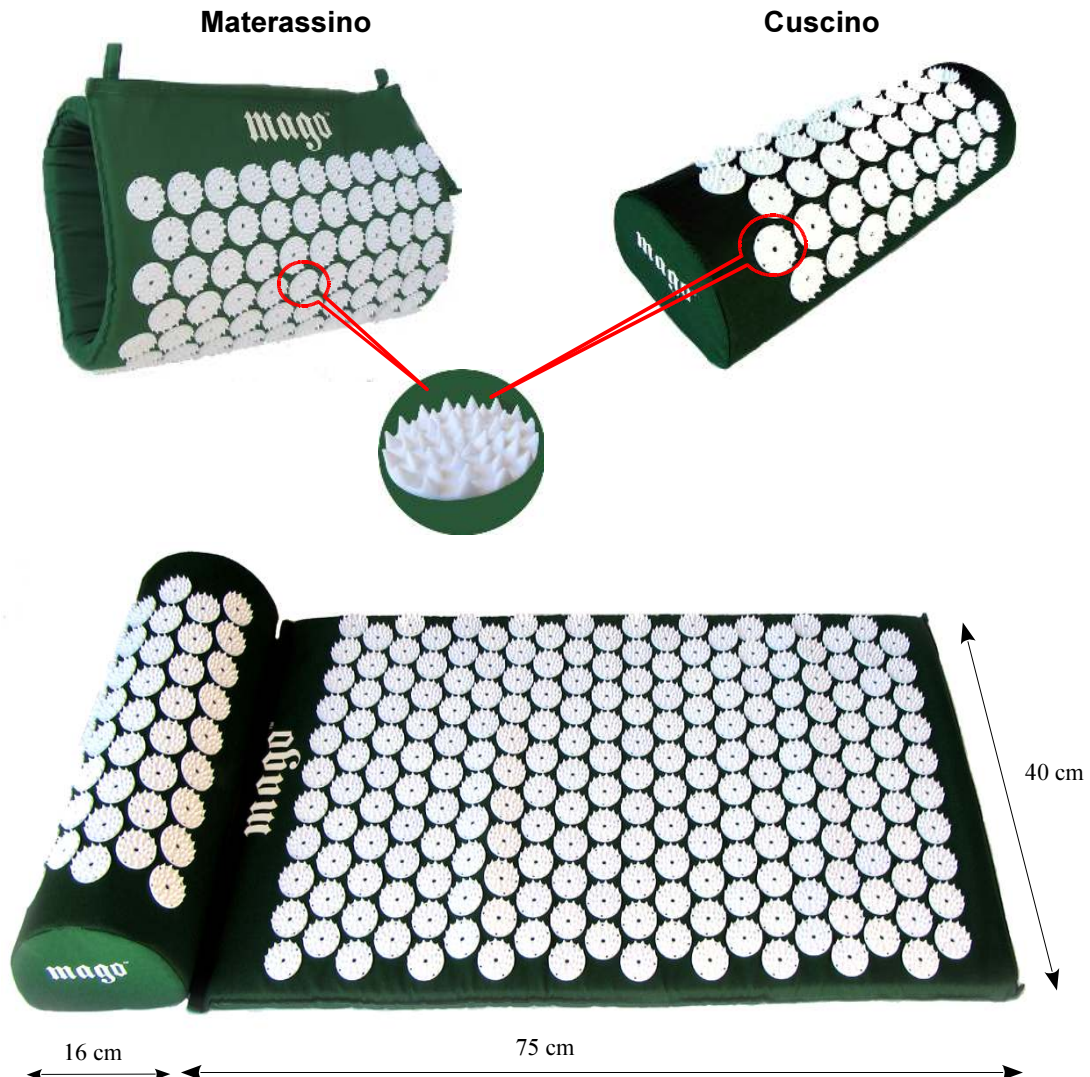

Concilia il sonno
Ossigena i tessuti
Stimola la circolazione
Combatte i cali di energia
Crea un effetto analgesico e rilassante

La pressione del peso del corpo sopra le punte stimola il sistema nervoso aumentando la produzione di endorfine particolari sostanze conosciute anche come l'ormone della felicità. Fin dal primo utilizzo ci regaliamo uno stato di benessere diffuso e profondo e lo stress diminuisce. Il flusso sanguigno aumenta apportando più ossigeno ai tessuti spazzando via tossine e prodotti di scarto. La muscolatura si distende e si rilassa e ciò è utile soprattutto a chi soffre di dolori alla schiena, cervicale, dolori articolari. Il materassino è un potente strumento contro la depressione. Se usato in orario serale migliora la qualità del sonno. L'utilizzo costante è utile per chi soffre di ipertensione.

Utilizzo

Inizia lentamente, per pochi minuti, poi riprova.

Fai qualche test per capire cosa senti e quali sono le posizioni più utili. Cerca un ambiente confortevole con una temperatura mite. Puoi provare il materassino su varie parti del corpo ed utilizzare varie posizioni come ad esempio sopra una superficie morbida, il letto, un tappeto, una coperta. Potresti trovare utile utilizzarlo anche su una sedia. Di seguito alcune posizioni :



Molto utilizzato da sportivi ed atleti per rilassamento al termine dell'allenamento. Dopo l'utilizzo riporre il materassino arrotolato (non troppo stretto) oppure appeso. Puoi portarlo ovunque utilizzando la comoda sacca con tracolla fornita assieme al materassino.



Le domande più frequenti

E' doloroso?

Inizialmente, durante le prime sedute, potreste provare un senso di lieve dolore. Dipende dal vostro livello di sensibilità e dalla rigidità muscolare. Questa sensazione viene ben presto rimpiazzata da una piacevole sensazione di calore, e di rilassamento molto profondo. E' sufficiente un po' di pazienza e dedizione, senza voler anticipare i tempi.

Lascia segni sulla pelle?

Sulla schiena e su tutte le parti a contatto degli aghi possono rimanere piccoli segni che scompaiono al massimo entro un'ora. Il rossore cutaneo è il segnale positivo dell' aumento della circolazione.

Può essere utilizzato da chi ha molti nei?

Se avete nei particolarmente grandi e gonfi, che sanguinano, o se avete dubbi, contattate il vostro medico dermatologo prima di utilizzare il materassino

Quanto deve durare una seduta?

Consigliamo di iniziare con 10 minuti, per poi aumentare a 20, 30 o più secondo le proprie esigenze e reazioni fisiche. Rimanere stesi sul materassino per più tempo, comunque, non provoca danni.

E' possibile dormire sul materassino?

Quando il sonno è in arrivo vi consigliamo di togliere il materassino. In ogni caso non succede nulla, anzi scoprirete un sonno davvero profondo.

Ci sono problemi igienici?

Consigliamo un uso personale (ogni utente dovrebbe avere il proprio) per garantire la massima igiene. E' possibile lavarlo(vedere in ultima pagina)

Possono usarlo i bambini e gli anziani?

Per i bambini, che hanno una pelle più sensibile, stendere un panno in cotone fine tra materassino e pelle. Gli anziani possono trarre molti benefici con l'utilizzo costante del materassino.

Precauzioni

Non utilizzare il materassino se:

- Sono presenti problemi cardiaci
- Sei in gravidanza
- Soffri di malattie a carico del sistema circolatorio o stai utilizzando anticoagulanti (es. Warfarin, Eparin)
- Hai problemi o danni alla pelle che ti possono provocare dolore durante l'utilizzo del materassino
- Soffri di psoriasi o qualche allergia che ti provoca dermatite
- Hai delle ferite ancora aperte, non riemarginate

Utilizza il materassino con cautela se hai una pelle sensibile o altre condizioni che ti possono far provare dolore durante l'utilizzo.

I bambini non devono utilizzare il materassino senza la supervisione di un adulto. Per proteggere la loro pelle delicata mettere un lenzuolo tra corpo e materassino.

Le informazioni contenute in queste pagine hanno esclusivamente scopo informativo e non intendono sostituire il parere del medico, di altri operatori sanitari o professionisti del settore, che devono in ogni caso essere contattati per l'indicazione di un corretto programma terapeutico.

Caratteristiche

Materassino:

Misure: 75x40x2,5 cm . Punti di agopressione: 8.820 disposti in 210 rosette in plastica. Materiale del tessuto: 100% cotone naturale. L'interno è in spugna . Materiale plastico delle rosette: ABS riciclabile

Cuscino:

Misura : 40x16x11 cm. Punti di agopressione: 2.394 disposti in 57 rosette in plastica. Caratteristiche dei materiali utilizzati: le stesse del materassino.

Controlli sul prodotto finito hanno confermato per questo articolo la totale assenza di materiali nocivi alla salute quali ftalati e metalli pesanti.

Lavaggio: lavare a mano in acqua fredda o tiepida togliendo prima l'interno in spugna. E' possibile utilizzare un sapone neutro. NON lavare in lavatrice NON utilizzare l'asciugatrice



Acquisto Online:

<https://miofasciale.com/negozio-miofasciale/>

Acquisto Rapido PayPal: <https://paypal.me/miofasciale/29>

Acquisto rapido Satispay: <https://tag.satispay.com/miofasciale/29>

Distributore:

SPEEDAGILITY

di R. Casagrande

31029 Vittorio Veneto (TV)

CONTATTI:

Tel.: **0438250640** LU-VEN. 8,30-19 SAB. 9-17

mob/whatsapp: 3276529561

[instagram.com/miofasciale](https://www.instagram.com/miofasciale)

[facebook.com/miofasciale](https://www.facebook.com/miofasciale)

mail: info@miofasciale.com

© SPEEDAGILITY®

E' vietata la riproduzione, totale o parziale, di foto, immagini e testi.

I contenuti di questa brochure sono di proprietà e non possono essere resi disponibili in qualsiasi altro supporto, digitale o stampato, senza il preventivo consenso scritto.